

Keeler okvir za lupe

UPUTE ZA UPOTREBU

SADRŽAJ

1. INDIKACIJE ZA UPOTREBU	2
1.1 UPOZORENJA I MJERE OPREZA	2
1.2 KONTRAINDIKACIJE.....	3
2. UPUTE ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU	4
3. PRIPREMA I KORIŠTENJE OKVIRA ZA LUPE	4
4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	6
5. REZERVNI DIJELOVI I DODATNI PRIBOR	6
6. JAMSTVO.....	6
7. INFORMACIJE O PAKIRANJU I ODLAGANJU	7

	Pogledajte upute za upotrebu		Opći znak upozorenja
	Datum proizvodnje		Conformité Européene
	Naziv i adresa proizvođača		Ograničenje temperature
	Zemlja proizvodnje		Ovlašteni zastupnik u Europskoj Zajednici
	Odlaganje električne i elektroničke opreme		Kataloški broj
	Strelice prema gore		Serijski broj
	Čuvati na suhom		Ograničenje atmosferskog tlaka
	Lomljivo, pažljivo rukovati		Ograničenje vlažnosti
	Ne upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno		Prijevod

Keeler okvir za lupe dizajniran je i proizveden sukladno Direktivi 93/42/EEZ, Uredbi (EU) 2017/745 i normi ISO 13485 za sustave upravljanja kvalitetom medicinskih proizvoda.

Klasifikacija: CE: Klasa I

FDA: Klasa II

Podaci sadržani u ovim uputama ne smiju se reproducirati u potpunosti ili djelomično bez prethodnog pisanog odobrenja proizvođača. U sklopu politike za kontinuirani razvoj proizvoda, kao proizvođač zadržavamo pravo izmjene specifikacija i drugih podataka sadržanih u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

Ove upute za upotrebu dostupne su na web stranicama Keeler UK i Keeler SAD.

Autorsko pravo © Keeler Limited 2021. Tiskano u Velikoj Britaniji 2021.

1. INDIKACIJE ZA UPOTREBU

Namjena / svrha uređaja

Keeler lupe i okvir namijenjeni su za upotrebu u različitim kliničkim okruženjima uključujući ali ne ograničeno na korisnike dentalnih praksa, oftalmološke klinike, operacijske sale, bolnice, veterinarske prakse, privatne konzultantske ordinacije i kirurško okruženje od strane obučenihi studenata i iskusnih profesionalaca.

1.1 UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Molimo imajte na umu da je ispravan i siguran rad naših instrumenata jamčen kada su instrumenti i njihov dodatni pribor isključivo od proizvođača Keeler Ltd.

Vodite računa o sljedećim upozorenjima kako bi osigurali sigurno korištenje okvira za lupe.



UPOZORENJA

- Molimo imajte na umu da je ispravan i siguran rad naših instrumenata jamčen kada su instrumenti i njihov dodatni pribor isključivo od proizvođača Keeler Ltd.
- Prije upotrebe proizvode tvrtke Keeler pregledajte za moguća oštećenja nastala tijekom transporta ili skladištenja.
- Ne koristite proizvod ako je vidljivo oštećen i povremeno ga pregledajte za znakove oštećenja ili zloupotrebe.
- Federalni zakon Sjedinjenih Američkih Država ograničava prodaju ovoj uređaja od strane ili na preporuku liječnika.
- Ovaj uređaj smije koristiti samo obučeni i ovlašteni zdravstveni djelatnik.
- Ovaj se proizvodi ne smije uroniti u tekućinu.



OPREZ

- Koristite samo originalne odobrene dijelove i dodatnu opremu tvrtke Keeler jer u protivnom sigurnost uređaja može biti ugrožena.
- Proizvod je dizajniran za siguran rad pri ambijentalnoj temperaturi između +10°C i +35°C.
- Čuvati izvan doseg djece.
- Kako ne bi došlo do kondenzacije, uređaj se treba prilagoditi sobnoj temperaturi prije upotrebe.
- Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru (zaštiti od vlage).
- Ovaj uređaj nema dijelova koje može popraviti korisnik. Kontaktirajte ovlaštenog servisnog zastupnika za više informacija.
- Neprovođenje preporučenog rutinskog održavanja prema ovim uputama o proizvodu može smanjiti operativni radni vijek proizvoda.
- Na kraju radnog vijeka proizvod odložiti sukladno lokalnim smjernicama za električne i elektroničke uređaje.

1.2 KONTRAINDIKACIJE

Ne postoje ograničenja za bolesnike na kojima se ovaj uređaj smije koristiti osim onih ograničenja navedenih u kontraindikacijama u nastavku.

Keeler okvir i lupe ograničavaju korisnikovo vidno polje i dubinu polja, prisiljavajući ga da prihvati neugodne položaje glave i vrata kako bi bolje vidio.

2. UPUTE ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU

Kao što je opisano, samo ručno čišćenje, bez uranjanja u tekućine, treba primijeniti za ovaj instrument. Ne dezinficirati u autoklavu ili uranjati u tekućine za čišćenje.

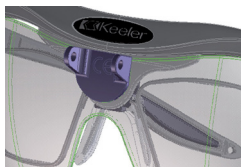
1. Vanjsku površinu obrisati čistom upijajućom krpom koja se ne trusi te navlaženom otopinom deionizirane vode / deterđenta (2% deterđenta po volumenu) ili otopinom vode / izopropil alkohola (70%-tni alkohol po volumenu). Izbjegavati optičke površine.
2. Voditi računa da višak tekućine ne proдре u uređaj. Biti oprezan da krpa za čišćenje nije zasićena otopinom.
3. Površine moraju biti pažljivo ručno osušene krpom koja se ne trusi.
4. Korištene materijale za čišćenje odložite na siguran način.

3. PRIPREMA I KORIŠTENJE OKVIRA ZA LUPE

1. Stavite lupe na okvir pomoću sustava za postavljanje s pinovima kako je prikazano.



2. Zaštitno staklo se potiskom pritiska na mjesto kako je prikazano.



Zaštitno staklo u ispravnom položaju

3. Okvir s dioptrijskim staklima se postavlja kako je prikazano, ako je potrebno.



Zaštitno staklo u ispravnom položaju

4. Most okvira podesite okretanjem sigurnosne bravice u poziciju prikazanu za otpuštanje mosta na okviru. Most se tada može uklizati u potrebni položaj.
5. Osigurajte most na okviru tako da okrenete sigurnosnu bravicu u poziciju kako je prikazano.

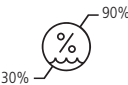
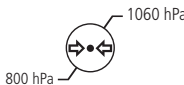
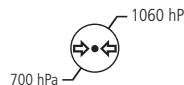
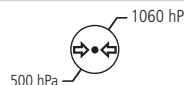


6. Za čvrsto pritanjanje okvira uz glavu korisnika, klizne držače na krilima pomaknite u udobnu poziciju



4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Uvjeti u okolini:

UPOTREBA		
		
Udarac (bez pakiranja)	10 g, tijekom 6 ms	
SKLADIŠTENJE		
		
TRANSPORT		
		
Vibracija, sinusoidalna	10 Hz do 500 Hz: 0,5g	
Udarac	30 g, tijekom 6 ms	
Blaži udarac	10 g, tijekom 6 ms	

5. REZERVNI DIJELOVI I DODATNI PRIBOR

Stavka	Kataloški broj dijela
Naglavni nosač za kirurške lupe	2199-P-7259
Naglavna traka	2199-P-7523
Visokokvalitetna krpica za leće u futroli	2199-P-7136

6. JAMSTVO

Uređaj nema dijelova koje korisnik može popraviti - svako preventivno održavanje i servis moraju obaviti samo ovlašteni predstavnici tvrtke Keeler.

Vaš Keeler proizvod ima garanciju 3 godine te će biti zamijenjen ili besplatno popravljen u sljedećim slučajevima:

- Zbog svake greške u proizvodnji.
- Instrument i dodatni pribor su korišteni sukladno ovim uputama.
- Dokaz kupovine treba priložiti uz svaki zahtjev.

7. INFORMACIJE O PAKIRANJU I ODLAGANJU

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme



Simbol na proizvodu ili na pakiranju i upute navode da se s ovim proizvodom neće postupati kao s kućnim otpadom.

Kako bi se smanjio utjecaj na okoliš otpadne električne i elektroničke opreme te smanjio obujam takvog otpada potičemo vas da nakon isteka vijeka proizvoda ovaj uređaj recikirate ili ponovno iskoristite.

Za više informacija o prikupljanju, ponovnoj upotrebi i recikliranju molimo kontaktirajte službu B2B usklađenosti na broj 01691 676124 (+44 1691 676124). (Samo za Veliku Britaniju).

Svaki štetni događaj koji je povezan s uređajem mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu u vašoj zemlji članici.

Kontakt



Proizvođač

Keeler Limited
Clewer Hill Road



Windsor
Berkshire
SL4 4AA UK

Besplatni telefon 0800 521251

Tel +44 (0) 1753 857177

Fax +44 (0) 1753 827145

Predstavništvo u SAD-u

Keeler USA

3222 Phoenixville Pike

Building #50

Malvern, PA 19355 USA

Besplatni telefon 1 800 523 5620

Tel 1 610 353 4350

Fax 1 610 353 7814

Predstavništvo u Indiji

Keeler India

Halma India Pvt. Ltd.

Plot No. A0147, Road No. 24

Wagle Industrial Estate

Thane West – 400604, Maharashtra

INDIA

Tel +91 22 4124 8001

Predstavništvo u Kini

Halma China Group

名称：沃迈（上海）机电有限公司

地址：上海市闵行区金都路1165弄

123号23幢一号厂房三层B座

电话：021-6151 9025

EC

REP

Visiometrics, S. L., Vinyals, 131
08221 Terrassa, Spain

EP59-19025 izdanje C Datum izdavanja 12/05/2021

Keeler
– A world without vision loss –